



Onze specials, jouw oplossing

Life & Mobility





Onze missie & visie

“Wij dromen van een toekomst waarin iedereen vrij is om zelf te kiezen en gelijke kansen heeft. Life & Mobility wil positief bijdragen aan het gevoel van vrijheid van mensen met een mobiliteitsbeperking. Leven zoals jij dat wilt. Een gevoel dat vleugels geeft. Dat is de visie die ons beweegt! Een visie die voor ons geen grenzen kent.”


Life & Mobility heeft zich sinds de oprichting in 1952 ontwikkeld tot specialist op het gebied van zittende mobiliteit. Individueel maatwerk is daarbij een essentieel en waardevol onderdeel van onze dienstverlening. Wanneer ons standaard assortiment niet de passende oplossing biedt, gaan we verder. In onze Specialty Centers in Kerkrade en Doetinchem ontwikkelen onze

ervaren en betrokken vakmensen de juiste oplossing voor vaak complexe vraagstukken. Met onze speciale technische teams krijgen individuele aanpassingen de aandacht die ze verdienen. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de levenskwaliteit van onze cliënten. Daar zijn we trots op.

Inspired by life!

De gebruiker centraal

Positief bijdragen aan het gevoel van vrijheid van mensen met een mobiliteitsbeperking. Dat vinden we belangrijk. In de praktijk betekent dit dat we bij de ontwikkeling van onze producten kijken naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen. Het functioneren en de wensen van de cliënt staan daarbij altijd voorop. Vanuit de stoornis, beperking en behoefte van de gebruiker komen we zo tot de juiste functie-eisen die aan mobiliteitsoplossingen worden gesteld. Met een breed assortiment manuele en elektrische rolstoelen bieden we voor iedere gebruiker een passende oplossing.

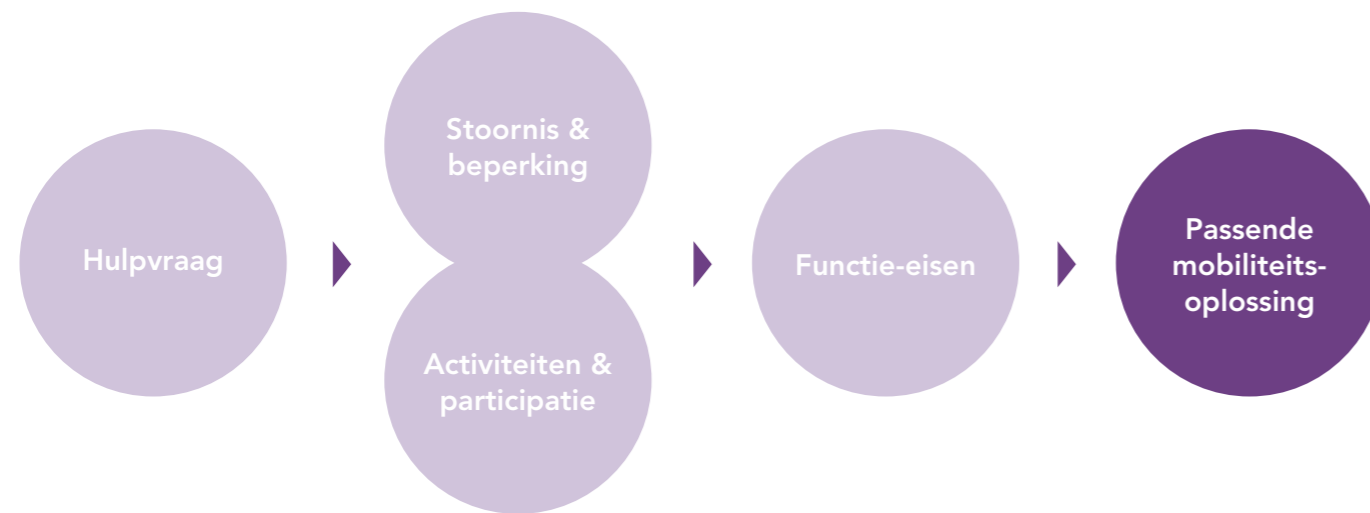

Vaak biedt ons standaard assortiment een passende oplossing. Met een team van betrokken technische vakmensen met jarenlange ervaring, zijn we bovendien in staat om de producten binnen ons assortiment aan te passen aan de unieke wensen en behoeften van de individuele gebruiker. Waar ons standaard assortiment stopt, gaat ons individueel maatwerk verder.



Individueel maatwerk

In onze goed uitgeruste Specialty Centers in Kerkrade en Doetinchem ontwikkelen we hoogwaardig individueel maatwerk. Onze ervaren vakmensen zorgen er voor dat we, ondanks de complexe technische vraagstukken, samen met alle betrokkenen altijd de juiste productoplossing kunnen bieden. Doordat we een speciaal team in de organisatie hebben voor individueel maatwerk, krijgt het de aandacht die het verdient.



Constructieve samenwerking

Bij de ontwikkeling van individuele oplossingen komt veel kijken. Elke situatie is anders en vraagt een nauwkeurige omschrijving van de stoornis, beperking en behoefte van de gebruiker. Deze bepalen de functie-eisen aan het product. Denk daarbij aan de (binnen) omgeving, persoonlijke voorkeur of taxivervoer. Goede samenwerking is daarom essentieel om tot de passende individuele oplossing te komen. Onze productadviseur is persoonlijk betrokken bij het vaststellen van de specificaties en zal je gedurende het gehele traject samen met ons sales support team adviseren en begeleiden.



Ervaren technisch specialisten

Nadat alle aspecten van het maatwerk nauwkeurig zijn bepaald, wordt er een technisch hoogwaardige oplossing gemaakt. Onze goed opgeleide en ervaren specialisten ontwerpen de passende oplossing, waarbij ze complexe technische uitdagingen zeker niet uit de weg gaan. Door het gebruik van de juiste materialen en machines garanderen we een goed werkende en kwalitatief duurzame oplossing waarop je jaren kunt vertrouwen.



Gegarandeerd veilig

Individueel maatwerk heeft een bijzondere positie binnen de medische wetgeving. Het is belangrijk dat door het unieke karakter een juiste inschatting met betrekking tot productveiligheid wordt gemaakt. Een gestructureerde risicoanalyse is daarom altijd verbonden aan ons ontwikkelproces van individuele maatwerkoplossingen. Taxivervoer is bijvoorbeeld een onderdeel dat hierin meegenomen kan worden. Door deze werkwijze kunnen wij je de juiste service bieden en is de veiligheid voor de eindgebruiker gegarandeerd.

Productaansprakelijkheid volgens MDR

Er zijn nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR). Onder deze medische wetgeving wordt ook iedereen die een hulpmiddel wijzigt productaansprakelijk. Voorkom verrassingen en laat noodzakelijke wijzigingen uitvoeren door de fabrikant.

Crashtest safe

Alle producten in ons assortiment die voor taxivervoer gebruikt kunnen worden, zijn crashtest safe bevonden en herkenbaar aan het taxihakksymbool. Dit geldt ook voor veel van onze maatwerkoplossingen.



Onze Specialty Centers

In onze Specialty Centers in Kerkrade en Doetinchem bijten onze ervaren vakmensen zich vast in complexe, technische vraagstukken. Door niet los te laten, blijven we ontwikkelen. Iedere dag.

Maatwerk voor elektrische rolstoelen

Aanpassingen aan elektrische rolstoelen ontwerpen en bouwen we in ons Specialty Center in Kerkrade. Ons team krijgt dagelijks aanvragen van klanten uit binnen- en buitenland. Veel rolstoelgebruikers hebben complexe stoornissen die vragen om persoonsgebonden oplossingen. Dankzij de ruimte, creatieve vrijheid en onze gemotiveerde technisch specialisten, kunnen wij nagenoeg elke aanpassing realiseren.



KERKRADE



“Wij zoeken altijd technische grenzen op. Zo kunnen wij nagenoeg elke aanpassing realiseren.”

Remco Ploum

Operationeel manager Kerkrade



DOETINCHEM

Maatwerk voor manuele rolstoelen

Ons Specialty Center in Doetinchem focust zich volledig op individueel maatwerk voor ons manuele rolstoelassortiment. Onze productadviseurs ondersteunen bij het vastleggen van de juiste specificaties. Hierdoor zijn wij er zeker van dat de oplossing 100% aansluit aan de persoonlijke wensen van de gebruiker. Ook rolstoelen die in gebruik zijn maar niet meer voldoen aan de behoeften van de cliënt passen we hier aan.

Afhankelijk van de gevraagde maatwerk-oplossing zijn er 3 mogelijkheden:

- Wij passen de betreffende rolstoel aan.
- De technische productoplossing sturen we samen met een duidelijke instructie toe om zelf aan de stoel te monteren.
- Wij bouwen de oplossing op een nieuwe rolstoel.



Een passend advies

Samen bieden we de cliënt de veilige, duurzame, kwaliteitsoplossing die hem of haar écht verder helpt. Tijdens de ontwikkeling van het vaak complexe maatwerk, werken onze technisch specialisten intensief samen met een speciaal team voor individueel maatwerk. Zij zorgen ervoor dat het traject soepel en volgens planning verloopt. Om iedere maatwerkoplossing onze volle aandacht te geven, doorlopen we daarbij steevast de volgende stappen:

- 1 AANVRAAG** Een aanvraag van een dealeradviseur aan Life & Mobility om mee te denken over een probleem waarbij de standaard oplossing niet toereikend is.
- 2 PASSING & ADVIES** Een advies op maat om met een technische productoplossing, zoals speciale besturingen of andere productideeën, tot een passende oplossing voor de cliënt te komen.
- 3 OFFERTE** Uitwerken van de offerte door Life & Mobility met bijhorende maten, tekeningen en foto's.
- 4 BESTELLING & PRODUCTIE** Na de bestelling gaat de rolstoel bij Life & Mobility in productie. Een deel van de productie zal de standaardprocedure doorlopen. Vervolgens wordt het product getransporteerd naar het Specialty Center in Doetinchem of Kerkrade, waar de special nauwkeurig wordt afgebouwd en gemonteerd.
- 5 LEVERING & NAZORG** De uitlevering van de rolstoel. Indien gewenst is hier een productspecialist van Life & Mobility bij aanwezig om de mechanische en softwarematige instellingen uit te voeren. Zo bieden we een totaaloplossing voor de cliënt.

Transferzitting

Onze special die het opstaan vanuit een rolstoel eenvoudiger maakt

“Als mensen door krachtverlies in de benen minder goed kunnen staan, is verplaatsing een uitdaging. Actieve transfers kosten veel inspanning en kunnen zelfs pijnlijk zijn. In zo'n situatie kan een transferzitting uitkomst bieden. Deze zitting helpt mensen om zichzelf veilig en verantwoord te verplaatsen.”

Leon Baars

Productadviseur Life & Mobility



Productoplossing

Door middel van twee actuatoren wordt de achterzijde van de zitplaat omhoog gebracht en wordt een negatieve stand in het zitvlak gecreëerd. Met de joystickbesturing kan de gebruiker de zitplaat tot -20 graden instellen. Hierdoor wordt het opstaan vanuit de rolstoel een stuk eenvoudiger.






Transferlift

Onze special voor volledige zelfstandigheid tijdens een transfer

“Voor cliënten met dwerggroei of kleine kinderen is het zelfstandig in en uit een elektrische rolstoel komen niet vanzelfsprekend. Door de grote instaphoogte is deze doelgroep vaak hulpbehoevend tijdens het transfermoment. Met de transferlift creëren we volledige zelfstandigheid tijdens de transfer.”

Niels Kokkeler

Productadviseur Life & Mobility

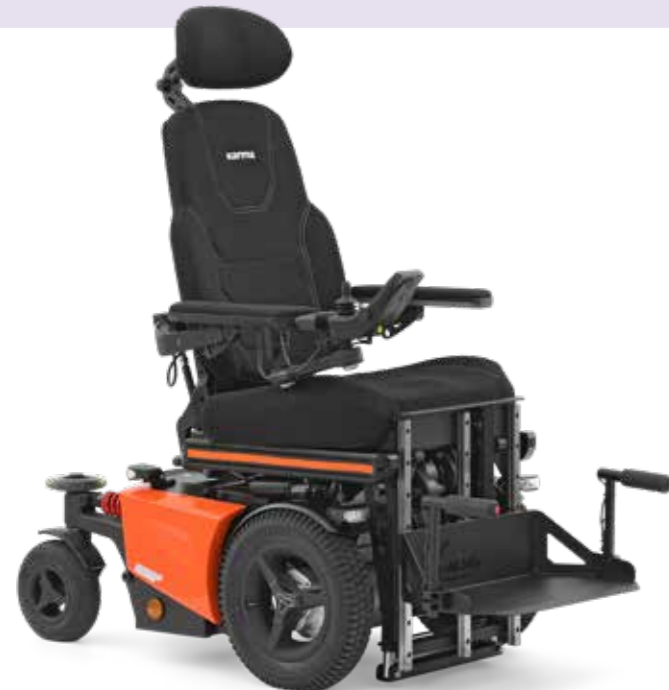

Productoplossing

Dankzij de doorlopende voetplaat die met een liftfunctie aan de stoel bevestigd zit, kan de cliënt zelfstandig in en uit de stoel komen. Met twee licht bedienbare knoppen gaat de lift op en neer. De bedieningsknoppen zijn stand-alone. Ze kunnen aan de voorzijde van de transferegrepen worden geplaatst, maar ook elders; precies waar het de cliënt het beste past.



Stabiel en veilig

Eenvoudig bedienbaar

Volledige zelfstandigheid, de voetplaat kan omlaag tot op de grond

EVO Lectus

Eenhandige hefboomaandrijving

Onze special voor een eenhandige aandrijving en besturing

Productoplossing

De eenhandige hefboomaandrijving biedt de cliënt actieve mobiliteit en vrijheid om zichzelf te kunnen verplaatsen. De rolstoel wordt voortbewogen door de hefboom in repeterende voor- en achterwaartse bewegingen te duwen en te trekken. De handvaten aan de hefboom fungeren daarbij als stuurfunctie. Door de handvaten in de juiste richting te draaien worden de zwenkwielen door de koppelstang de juiste kant op gestuurd.

“De klassieke manier van voortbewegen van een rolstoel is niet voor elke cliënt vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld door hemiplegie kan een andere manier van aandrijven gewenst zijn. Een eenhandige hefboomaandrijving kan dan uitkomst bieden.”

Hans Steentjes

Technisch Specialist Doetinchem



MyPlus, onze speciale adaptatierolstoel

De opbouw van het frame van de MyPlus geeft de mogelijkheid om te kunnen voorzien in de meeste maatwerk aanvragen voor manuele rolstoelen. Hiermee kan een enorme diversiteit aan functiebeperkingen en behoeften van cliënten vertaald worden naar een passende productoplossing; denk hierbij aan cliënten met obese of bijvoorbeeld cliënten met een meervoudige handicap.





Intuïtieve begeleidersbediening

Een voorbeeld van onze samenwerking met andere toeleveranciers

“Het afleggen van lange afstanden in een rolstoel kan de cliënt vermoeien en resulteren in onveilige situaties. Ook het manoeuvreren in kleine ruimtes kan een uitdaging zijn. De intuïtieve begeleidersbediening maakt het mogelijk om de besturing tijdelijk van de cliënt over te nemen. Zo helpen we elkaar waar dat nodig is.”


Alex de Vries
Senior Technisch Specialist Kerkrade



Productoplossing

De intuïtieve begeleidersbediening van mo-vis past perfect op onze elektrische rolstoelen. Met een horizontale stuurbeweging op de stuureenheid kan de rolstoel gedraaid worden. In combinatie met de gashendel voor duimbediening (vooruit/achteruit) kan de rolstoel in iedere richting worden gereden.



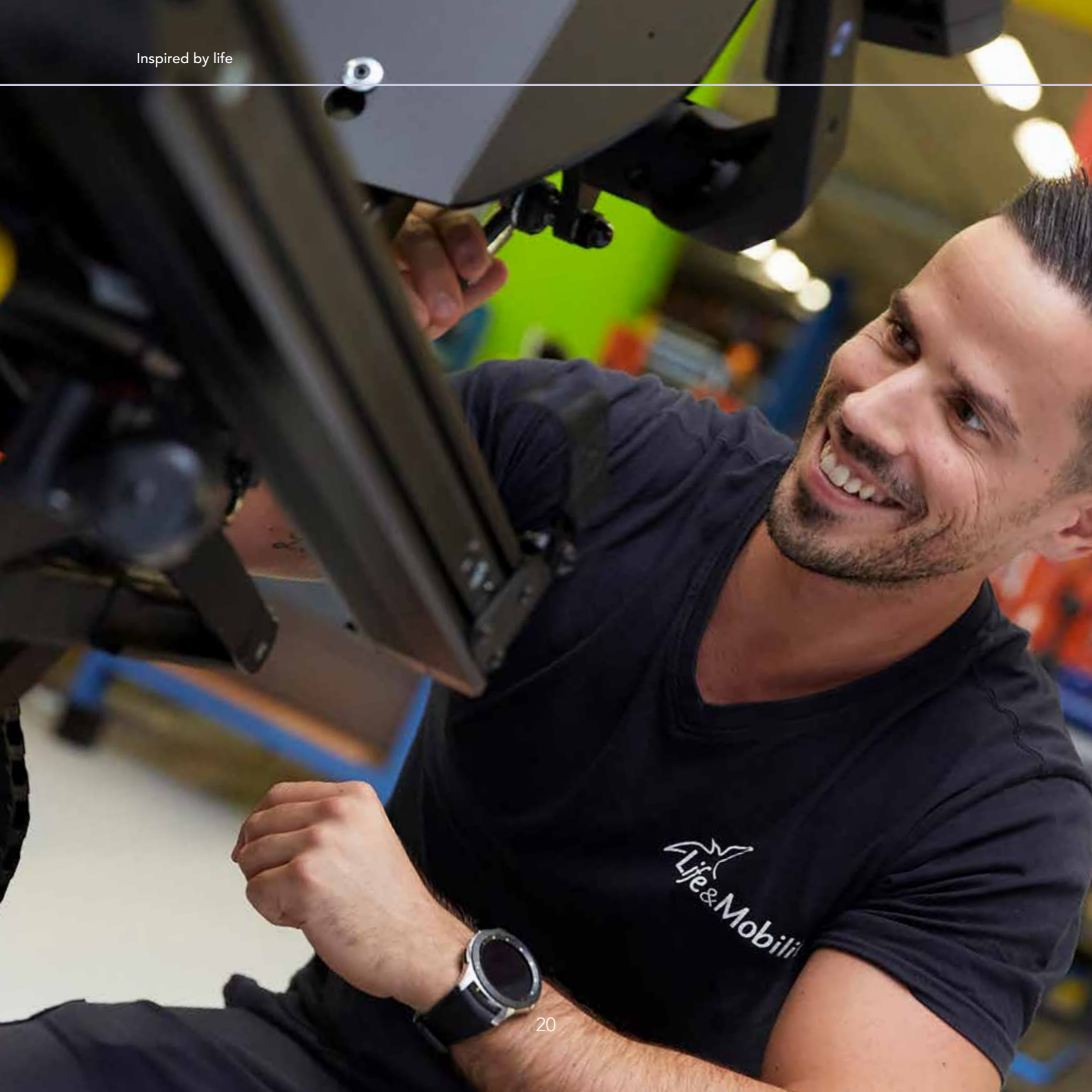

Veelvoorkomende aanpassingen

Sinds onze oprichting in 1952 zien we individuele aanpassingen als een essentieel en waardevol onderdeel van onze dienstverlening. Vanuit die jarenlange ervaring met individueel maatwerk kennen we inmiddels een aantal specifieke situaties, waarvoor we regelmatig maatwerk ontwikkelen. Dit zijn individuele oplossingen voor een goede zithouding, ondersteuning bij transfers en specifieke ontwerpen voor zwaar gebruik van de rolstoel.

Zitten en positioneren

Bij de ontwikkeling van ons Newton zitsysteem hebben we veel kennis en ervaring opgedaan ten aanzien van het goed zitten en positioneren van een cliënt bij intensief rolstoelgebruik. Door jarenlange samenwerking met ergotherapeuten en andere zorgprofessionals, is de Newton zitfilosofie ontstaan. Ook bij de ontwikkeling van individueel maatwerk is deze filosofie voor ons het startpunt voor iedere zit- en positioneringsoplossing. Kijk op www.life-mobility.com voor meer informatie over Newton of vraag onze productadviseurs om een advies op maat.

elke dag terugkomt. Het zelfstandig uitvoeren van een transfer voegt veel toe aan de zelfredzaamheid van de cliënt en daarmee aan de kwaliteit van leven. Vanzelfsprekend zetten we daarvoor graag een stapje extra!

Heavy duty

Sterkte en duurzaamheid zijn voor ons van groot belang. Een rolstoel wordt immers dagelijks gebruikt. Als daarbij ook nog sprake is van een zware belasting, bijvoorbeeld door gebruikersgewicht, spasmen of bewegingsonrust, dan voldoet een standaard oplossing vaak niet meer. In die situatie ontwerpen en bouwen we oplossingen die meer stabiliteit, duurzaamheid en individuele ondersteuning bieden.

Transfers

Niemand zit 24 uur per dag in een rolstoel. Daarom is de transfer van en naar de rolstoel een handeling die

Ter inspiratie



Match: verstelbare rughoek en individuele zithoek

Bij ons ortheseonderstel bieden we specifieke oplossingen voor individuele positionering. Bijvoorbeeld de verstelbare rughoek en de individuele zithoek. De verstelbare rughoek biedt, in combinatie met een flexibele orthese, de mogelijkheid voor kortdurende houdingsveranderingen. De bediening is comfortabel met een hendel aan het stuur. De individuele zithoek is vooral geschikt voor gebruikers die baat hebben bij een grotere 'basis-wig', terwijl het maximale kantelbereik beschikbaar blijft voor rusten of verzorging.



Versterkte centrale beensteun

De versterkte centrale beensteun is geschikt voor gebruikers die veel kracht uitoefenen op de beensteun. De gescheiden centrale beensteun is uitgevoerd met dubbele kartelschijven in de kniehoek, wat zorgt voor een extreem sterke verbinding. Tevens hebben de stalen voetplaten een scharnierende werking door middel van gasveren. Met deze aanpassingen kunnen spasmen en het uitoefenen van veel kracht worden opgevangen.



MyPlus obese

De MyPlus is verkrijgbaar in een extra sterke obese-uitvoering. Dankzij het midwiel onderstel heeft de obese-variant van de MyPlus gunstige rijeigenschappen. Het is een stevige rolstoel met een hoog zitcomfort en grote wendbaarheid voor een eenvoudige verplaatsing.



Elektrisch opklapbare armleggers

Wanneer de kracht en het hefvermogen in de armen van een cliënt vermindert, wordt het opklappen van armleggers, voor bijvoorbeeld een zijdelingse transfer, vaak een hele opgave. Met elektrisch opklapbare armleggers kan de cliënt de armlegger door een eenvoudige handeling met de joystick opklappen. De zelfstandigheid bij transfers blijft hierdoor behouden.



Inspired by life

Life & Mobility bv

PO Box 304
NL - 7000 AH Doetinchem
Logistiekweg 7
7007 CJ Doetinchem

T +31 (0)314 328 000
www.life-mobility.com
info@life-mobility.com

