

Assortimentswijzigingen per 1 Juli 2018

Ons assortiment is continu aan verandering onderhevig. Op de volgende pagina's vind je een samenvatting van de assortimentswijzigingen en noviteiten van het afgelopen halfjaar. De aangepaste prijslijsten staan ook al weer achter de login op de website. Inloggegevens kwijt? Geen probleem, wij verstrekken ze graag opnieuw!

Life & Mobility Frankrijk van start




Na de opening van onze vestiging in Berlijn, is afgelopen maand onze nieuwe vestiging in de buurt van Lyon officieel geopend. Met deze stap zijn we als Life & Mobility nu ook vertegenwoordigd in Frankrijk. Het enthousiaste Franse team van productadviseurs kwam onlangs op bezoek in Doetinchem om zich te laten bijpraten over alle noviteiten en ervaringen uit te wisselen met de Nederlandse collega's. Sta-rolstoelen hebben een belangrijke plek in het Franse assortiment. Een compleet overzicht en meer informatie over het Franse of het Duitse assortiment kun je vinden op de Life & Mobility website; www.life-mobility.com.

Online onderdelenboek

Gebruikersgemak en een toenemende vraag naar spare-parts waren voor Life & Mobility goede redenen om het online onderdelenboek verder te ontwikkelen. Je kunt nu bijvoorbeeld vanuit het systeem gemakkelijk een onderdeel bestellen met je telefoon. Belangrijke verbeteringen zijn:

- De spare-parts voor de elektrische rolstoelen zijn toegevoegd
- Het is mogelijk om direct vanuit het systeem een bestelling te plaatsen
- Het systeem toont prijzen bij de onderdelen
- Geschikt voor Windows, Android en IOS besturingssystemen
- Geschikt voor alle schermformaten, dus ook tablets en smartphones

Het onderdelenboek kun je vinden via de link op onze website. Voor het bestellen van onderdelen dien je in te loggen.

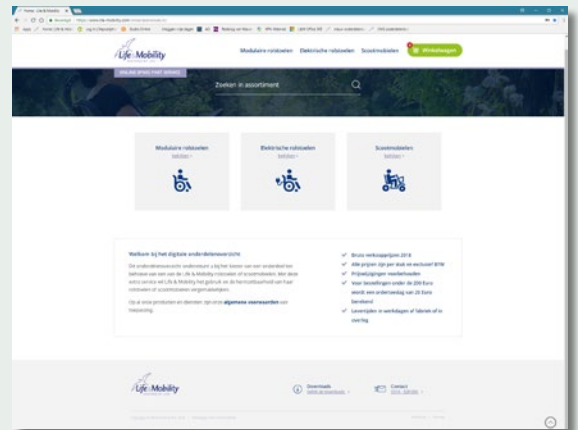

Specialty Center Kerkrade

Individuele aanpassingen zijn een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. De Life & Mobility vestiging in Kerkrade is een Specialty Center geworden voor Mobiliteit met Power. Hier kunnen onze specialisten jouw speciale wensen m.b.t. elektrische rolstoelen omzetten naar veilige oplossingen. Daarnaast hebben we een Specialty Center voor manuele mobiliteit. Deze bevindt zich bij het hoofdkantoor van Life & Mobility in Doetinchem. Als je hierover vragen hebt, dan kan onze customer service afdeling je verder helpen.





De perfecte Match

De Match is het makkelijk instelbare onderstel waarmee met geselecteerde zitortheses veilige combinaties gevormd kunnen worden. Op basis van gebruikerswensen zijn een aantal optimalisaties voor de Match ontwikkeld.

Reeds doorgevoerd

1. De bodemvrijheid is onder de zithoogtekolommen vergroot.
2. De voorwielen zijn beter haaks op de vloer af te stemmen, waardoor de rijeigenschappen van de rolstoel verbeterd zijn.

Aanstaande wijzigingen

3. De armleggerbocht en de opname in de zitplaat worden aangepast waardoor een duurzamer geheel wordt gevormd. Deze wijziging wordt doorgevoerd vanaf week 29. Daarbij worden de informatiestickers en uitleg bij de balanspuntinstelling verduidelijkt zodat deze bijdragen aan een juiste afstelling van de rolstoel.
4. Het geluid dat vrijkomt bij het ontgrendelen van de voetrem wordt verder gedempt, waardoor een mogelijke schrikreactie bij gebruikers of medebewoners wordt voorkomen. Deze wijziging wordt in het vierde kwartaal standaard op iedere Match doorgevoerd.



Continue rughoekverstelling Roxx

Vanwege wijzigingen binnen de Europese normen is de ophanging van de gasveren van de continue rughoekverstelling aan het Roxx frame verbeterd. De nieuwe montagebeugel die om het frame bevestigd wordt, vervangt de enkele bout die voorheen door het frame gemonteerd werd. De 'montageset gasveer rughoek Roxx' kan via het onderdelenboek ook los besteld worden en kan door de dealer gemonteerd worden om een bestaande uitvoering te updaten.



Onze alleskunner: de MyPlus

De MyPlus is onze basisrolstoel voor adaptaties. Het frame is in het afgelopen jaar herontworpen, waarbij rekening is gehouden met de vele adaptaties die in het verleden al zijn uitgevoerd. Op het bestelformulier zijn de meest voorkomende adaptaties alvast benoemd, maar ook afwijkende aanvragen kunnen via het formulier worden ingediend. Mocht de 'ocean blue' kleur toch niet helemaal bij jou passen, is dat geen probleem. De MyPlus is zonder meerprijs in iedere gewenste RAL kleur te bestellen.



Wijzigingen Rollit

De Rollit heeft de afgelopen periode een aantal wijzigingen ondergaan. Zoals bekend heeft de Rollit nu ook de nieuwe antiekiepsteunen en een vernieuwde stokhouder. Inmiddels wordt de Rollit, net als de MyPlus, standaard uitgevoerd met versterkte beensteunen en de semi-transparante zijkant. Spare parts van de oude antiekiepsteunen, stokhouder en beensteunen blijven gewoon leverbaar. Deze zijn te vinden in het online onderdelenboek.

Uit het assortiment

Spare parts Plus & Rollit

Per 1 juli zolang de voorraad strekt, kunnen nageleverd worden op RAL kleur. Standaard kleur is zwart.

Oud model Matrixx amputatiesteun

Per 1 juli uit het assortiment.

Spare parts oude modellen Solo TS120 en QS

Per 1 juli uit het assortiment.

Snellius zitelement

Per 1 juli uit het assortiment.

Zilvergrijze kappen oude modellen Solo TS120 en QS

Per 1 juli uit het assortiment.

Hoes voor de onafhankelijk instelbare beenondersteuning (OIB hoes)


Per 1 juli uit het assortiment.



Op koers met de @Work hulpaandrijving

Op basis van ervaringen uit de markt is er een update doorgevoerd van de software en hardware (printplaat) van de @Work hulpaandrijving. Deze is nu beter op de specifieke wensen van de klant af te stemmen. De verbeteringen zijn:

- Een toevoeging van koerscorrectie ("Side slope assist"), welke met de software aan of uit gezet en afgestemd kan worden op het gewicht van de gebruiker. Bij een onverwachte zijwaardse afwijking corrigeren de wielen afzonderlijk, waardoor de rolstoel toch rechtdoor blijft rijden.
 - koerscorrectie 'aan' is met name voor gebruik buiten, bij meer ongelijke ondergrond.
 - koerscorrectie 'uit' is geschikt bij éénhandige aandrijving (binnen) waarbij de rolstoelgebruiker met de voet stuurt.
- De uitloopafstand ("Coasting distance") van de motoren is breder instelbaar, dit wil zeggen;
 - de wielen blijven langer doorrollen bij iedere keer hoepelen waarmee de rolstoelgebruiker eenvoudiger lange afstanden kan afleggen.
 - Of de wielen rollen minimaal door, voor het gebruik van de hulpaandrijving in krappe ruimtes.
- De gevoeligheid ("Response level") van de hoepels is beter af te stemmen op de rolstoelgebruiker.

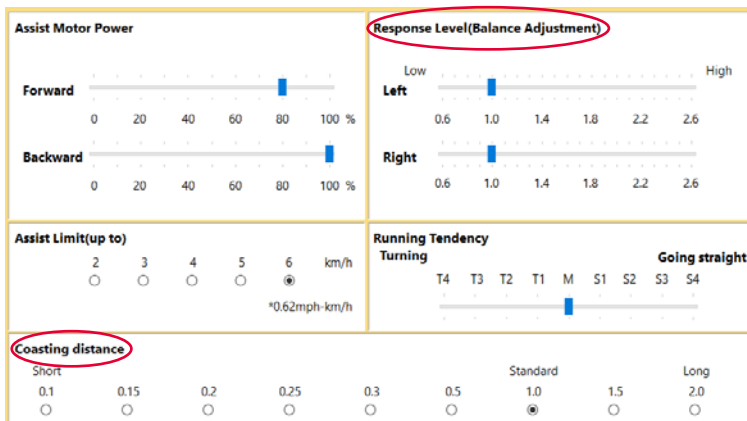

Aura – Manoeuvrerhendel

Voor gebruikers met weinig ervaring met duwondersteuning, bijvoorbeeld medebewoners in een instelling of vrijwilligers, blijkt het in praktijk lastig om met de motorondersteuning van de Aura te manoeuvreren in kleinere ruimtes of bijvoorbeeld de rolstoel goed te positioneren aan de tafel. Daarom is de Aura duwondersteuning optioneel te voorzien van een manoeuvrerhendel. Met deze optie kan, in de uit-stand, op de bedieningsunit de rem worden ontgrendeld door de hendel in te drukken. Daardoor kun je eenvoudig met de rolstoel manoeuvreren zonder dat de motoren geactiveerd worden of de wielen blokkeren. De Aura voorzien van Manoeuvrerhendel is te herkennen aan een extra blauwe bedrukking op de hendel en op de bedieningsunit.



Scootmobielen VID dag

Binnen ons scootmobiel assortiment hebben we op basis van gebruikersinformatie een aantal optimalisaties doorgevoerd:

- Verbeterde verlichting en zichtbaarheid (Solo)
- Universele accessoirehouder (Solo/Mezzo/Primo)
- Verbeterde stuurrubbers (Mezzo/Primo)
- Verbeterde spiegelbevestiging (Mezzo en binnenkort volgt de Primo)

Ook worden de scootmobielen nu geleverd met een aantal extraatjes:

- Slim-op-weg tips
- Ondershoudsboekje
- De Solo wordt nu geleverd met een nieuwe robuuste sleutel met geschenkdoosje

Alle aanpassingen zijn vanaf half april doorgevoerd op de scootmobielen of als accessoire te bestellen!

Tijdens de VID dag voor dealers zijn bovengenoemde noviteiten gepresenteerd, net als een unieke editie van onze Solo: de Blue Diamond! Deze stijlvolle uitvoering van de welbekende Solo werd met veel enthousiasme ontvangen.





De nieuwe Kelvin, daar zit méér achter



Ons Kelvin zitelement, voor gebruikers die niet meer in een gewone rolstoel kunnen zitten, is vernieuwd:

1. De zithoogte van de Kelvin is verlaagd, zodat de gebruiker beter bij de tafel kan zitten en transfers gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden.
2. Daarnaast is de rugzijde van de canvasbasis nu voorzien van een rits, waarin de nieuwe optionele support kussens op de gewenste plek geplaatst kunnen worden. Hiermee wordt passende individuele ondersteuning gegeven terwijl de cliënt in de stoel zit. De support kussens bieden:
 - a. Zijwaartse ondersteuning over de gehele lengte van de romp met het lange zij-support kussen
 - b. Lokale zijwaartse ondersteuning met het korte zij-support kussen
 - c. De kunststof zijplaat geeft extra stabiliteit (wordt altijd gebruikt in combinatie met a of b)
 - d. Lumbale ondersteuning met het lumbaal-support kussen
3. Het rughoekscharnier kan met een inbussleutel aangepast worden, zonder het canvas open te hoeven ritsen. Dit maakt aanpassingen eenvoudiger instelbaar.
4. Het nieuwe, optionele rughoek kussen kan in de onderste hoek van de canvasbasis geplaatst worden. Dit biedt extra ondersteuning aan gebruikers die in een grotere rughoek ondersteund moeten worden en is in 3 breedte-maatvarianten verkrijgbaar.
5. De nieuwe Kelvin is in één oogopslag herkenbaar aan de ronde rits op de rugzijde van het zitelement, in combinatie met de zilverkleurige bedrukking van de Life & Mobility vogel.

De Roxx connected!

In samenwerking met SAP (ontwikkelaar van bedrijfssoftware) hebben we een onderzoeksproject opgestart, waarbij we de zitting en rugleuning van de Roxx hebben uitgerust met een aantal sensoren, die we verbonden hebben aan het internet. Via deze innovatie kunnen we het zitgedrag van de rolstoelgebruiker in kaart brengen. Deze informatie gebruiken we bij de doorontwikkeling van ons Matrixx zitsysteem. Ook hebben we samen met onderzoeksbureau Locomotion en zorginstelling Sensire Den Ooiman een wetenschappelijke studie uitgevoerd naar de relatie tussen (goed) zitten en het welzijn van de rolstoelgebruiker. Hiervan is een mooi filmpje gemaakt die op onze website staat. Deze kun je via deze link bereiken: www.life-mobility.com/nl/nieuws/smart-wheelchair-prototype/



Morgan banden

Vanaf nu wordt de Morgan standaard geleverd met zwarte banden. De zwarte non-marking luchtbanden passen goed bij het zwarte frame en geven de Morgan daardoor een mooie en eigentijdse uitstraling. Natuurlijk blijven de grijze banden als optie te bestellen en zijn voor beide kleuren tevens massieve PU banden beschikbaar. Binnenkort ook voor de Leon, we houden je op de hoogte!



Privacy wetgeving

Wij weten veel over onze klanten, maar doen er alles aan om die informatie te beschermen. Wil je weten hoe wij als Life & Mobility met je gegevens omgaan en hoe de privacy op onze website is geregeld?

Lees onze vernieuwde statement op de website: www.life-mobility.com/nl/privacyverklaring.