

NEOX



At the heart of
innovation

Inspired by life

 **Life & Mobility**

NEOX

Bei Life & Mobility setzen wir alles daran, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen so viel Freiheit wie möglich zu geben. Der Neox ist dafür ein gutes Beispiel.

Ein mehrfach verstellbarer Adaptiv-Rollstuhl, mit einem therapeutisch erprobten, anpassbaren und integrierten ergonomischen Sitz und Rückensystem. Ein Adaptivrollstuhl in dem wir unsere Newton Sitzvision wiederfinden. Der Neox spiegelt unsere Passion für innovative, auf den Menschen angepasste Mobilitätsprodukte wieder.

Neox ist für alle konzipiert, die für ihre tägliche Mobilität auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Menschen, die trotzdem genug unternehmen wollen und selbstständig unterwegs sein wollen, auch über längere Distanzen. Endbenutzer mit einem durchschnittlichem bis hohem Aktivitäts- und Beteiligungs-niveau und einem Bedarf an individueller Sitzunterstützung.

Mit Neox helfen wir ihnen, wieder das zu tun, was sie am meisten lieben. Die lustigen, schönen, besonderen oder einfachen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Was ihre Herzen höher schlagen lässt, ist unsere Inspirationsquelle für neue Innovationen.

- Integrierte Newton-Sitzvision
- Faltbare Newton FLX Sitzunterstützung
- Paralleler, hochwertiger Faltrahmen




- HMV-Nummer: 18.50.03.0266
- Passend für alle Körpergrößen mit 4 Rahmenvarianten

STANDARD:

- Integrierter Newton Sitz- und Rückenwinkel mit Newton FLX 2 Sitzunterstützung
- Rahmen- und Polsterfarbe schwarz
- Stabilisierungsstange der Rückenlehne
- Standard Reifenbremse
- Integrierte Taxibefestigung
- In der Höhe verstellbare Schiebegriffe
- PUR Armlehnen auf abnehmbare Seitenteile
- Abnehmbare, standard Beinstütze

OPTIONEN:

- Newton Curve Rückenlehne
- Newton FLX Contour Sitzkissen
- Luftreifen
- Radsturz
- Einhand Brems- und Antriebssystem
- Winkelverstellbare Beinstütze
- Montagesets für Hilfsantrieb
- Zubehör: Kopfstütze, Antikippstütze, Therapietisch, Stockhalter

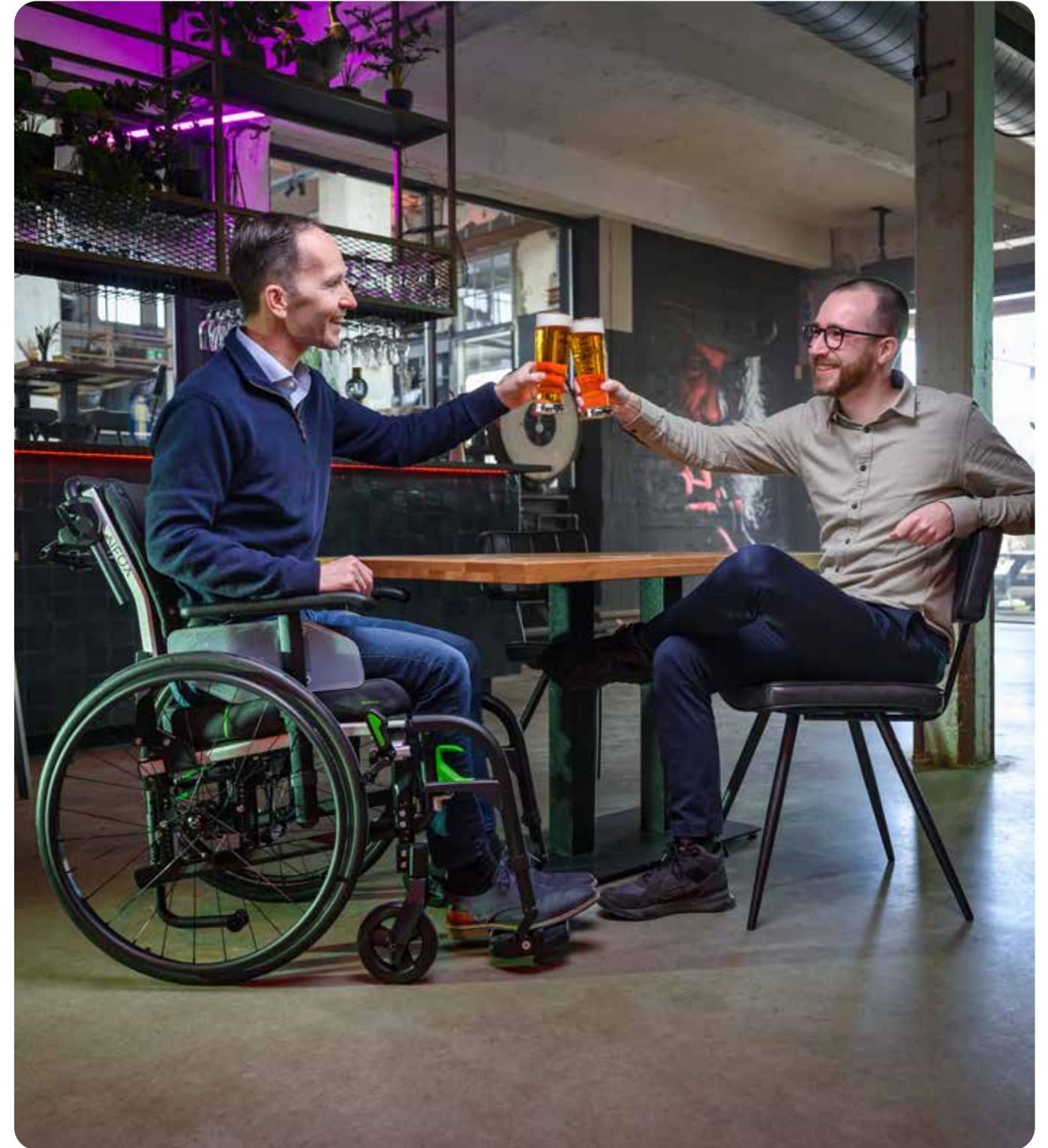

Seitenansicht



Rückansicht



Kompakt faltbar



Option: Newton Curve Rückenlehne

Neox-Konfigurator

Mit dem smarten Neox-Konfigurator können Sie den Neox ganz einfach an die spezifischen Wünsche und Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Geben Sie die wichtigsten Kundendaten ein und erhalten Sie die eindeutige Neox-ID. Eine klare Beratung zu der richtigen Sitzunterstützung und den passenden Einstellungen.



EIGENSCHAFTEN NEOX

Sitzbreite (SB)	34,5 - 57 cm	Rückenhöhe	43,5 - 62 cm
Sitztiefe (ST)	40 - 56 cm	Antriebsrad	20", 22", 24", 26"
Sitzhöhe (Rahmenhöhe) vorne (SH)	35 - 56 cm	Lenkrad	5", 6", 7", 8"
Höhe der Armlehnen (AH)	20 - 30 cm	Bremse	Reifenbremse
Unterschenkellänge (USL)	31,5 - 53 cm	Radsturz Antriebsrad	0° / 3°
Breite des Rollstuhls (BR)	SB + 18 cm	Gesamtgewicht	Ab 15 kg
Breite des Rollstuhls (BR) (i.K.m. Einhandantrieb)	SB + 22 cm	Transportgewicht	Ab 10 kg
Breite des Rollstuhls zusammengeklappt (inkl.Räder)	35,5 cm	Benutzergewicht	136 kg
Sitzneigung	12° bis 16°	Crashtest safe ISO 7176-19	Ja
Rückenneigung	-5° bis 30°	Taxibefestigung	Ja

Life & Mobility GmbH

Oderstraße 59
14513 Teltow (Berlin)
T +49 (0) 3328 - 338 1300
F +49 (0) 3328 - 338 1301

www.life-mobility.com
verkauf@life-mobility.com

Hauptsitz

Life & Mobility B.V.
Logistiekweg 7
NL- 7007 CJ Doetinchem
T +31 (0)314 - 328 000



Inspired by life

**Life & Mobility**